

# تعليمات خاصة بجمع اللعاب



**3 ابقق في القمع:** ابقق بلطف في القمع. احتفظ باللعاب في فمك دون أن تبلعه ثم قم ببصقه في القمع. فكر في شيء حلو أو مالح المذاق للمساعدة في إفراز اللعاب.



**2 افتح الحقيبة:** يوجد في الحقيبة قمع أزرق وأنبوب عليه غطاء أزرق. يوجد في الأنبوب سائل. قم بفتح الغطاء الأزرق بعناية وتجنب السكب وضع الأنبوب بوضع الوقوف. ضع طرف القمع داخل الأنبوب.




**1 التوقيت:** حاول جمع عينتك في الصباح قبل التسليم. وإذا قمت بجمع العينة في الليلة السابقة قم بوضعها في الثلاجة حتى يتم تسليمها. يرجى تجنب الأكل، أو لشرب، أو مضغ اللبان، أو التدخين، أو استخدام الفيب/التدخين الإلكتروني قبل 30 دقيقة من جمع العينة.



**6 قم بخلطه:** بمجرد أن يتم إغلاق الغطاء بإحكام، قم بلطف برج الوعاء من 3-5 مرات لخلط كل شيء معا.



**5 تخلص من القمع:** قم بنزع القمع وإلقائه في القمامة. قم بإغلاق الغطاء الأزرق مرة أخرى على الوعاء. تأكد من لف الغطاء بإحكام لتجنب التسريب. إذا كنت صغيرا، اطلب المساعدة من بالغ كبير.

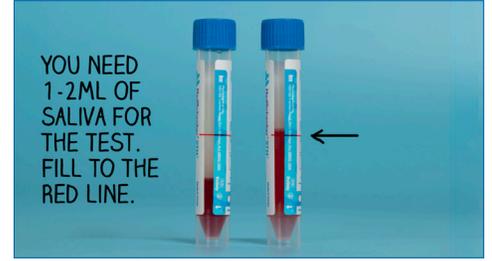

**4 قم بالملء إلى الخط الأحمر:** املا الوعاء بلعاب كافي ليصل إلى الخط الأحمر، وقد يستغرق ذلك عدة دقائق. تجاهل أي فقاعات في اللعاب فالفقاعات لا يتم حسابها في الكمية الإجمالية.



**9 الوضع في الحقيبة:** قم بوضع عينة اللعاب المغلفة الخاصة بك مرة أخرى في الحقيبة البلاستيكية التي جاءت فيها المستلزمات. أغلق الحقيبة بإحكام. قم بثني طلب الفحص المخبري الذي قمت بتعبئته وضعه في الجيب الخارجي للحقيبة البلاستيكية.



**8 قم بتعبئة الطلب:** قم بتعبئة طلب الفحص المعمل الخاص بك بالكامل. قم بكتابة اسمك القانوني بالكامل والذي يتطابق مع الاسم في بطاقتك الصحية.



**7 قم بكتابة الاسم على الأنبوب:** قم بكتابة اسمك القانوني الأول والأخير مع تاريخ ميلادك على الملصق. ضع ثبث الملصق رأسيا على الوعاء. تذكر إنه إذا لم يتم تغليف عينتك بشكل صحيح لن تتمكن من فحصها.

## نصائح للتغليف



يرجى تعبئة طلب الفحص باسمك القانوني الكامل. لا يمكننا قبول الأسماء المفضلة في هذه المرة.

الاسم الأول والأخير، بالإضافة إلى تاريخ الميلاد على نموذج الطلب يجب ان يتطابقوا مع ما كتب على طابع العينة.

تذكر تغليف عينتك. ف يمكن معالجة العينات غير المغلفة.

**10 قم بالتسليم:** يمكن وضع مستلزمات البصاق التي يتم استكمالها في المبرد بالمنطقة المخصصة **لوضع مستلزمات تحليل اللعاب بالمدرسة.** للحصول على النتائج في اليوم التالي قم بوضع عينتك قبل موعد مجيء شركة النقل لمدرستك (يمكنك التأكد من قيادة مدرستك بخصوص موعد مجيء شركة النقل). إذا حضرت لوضع العينة يوم الجمعة بعد قيام شركة النقل بأخذ العينات نطلب منك وضع العينة في الثلاجة طوال العطلة نهاية الأسبوع وقم بإحضارها يوم الاثنين قبل أن تأتي الشركة الناقلة. وذلك لضمان أن تظل درجة حرارة العينة مستقرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

